



FDX03T

使用に際してはこの添付文書をよくお読みください。
また、必要な時に読めるように保管しておいてください。

FDX03T

2007年10月作成(第1版)

体外診断用医薬品

製造販売承認番号: 20700AMZ00226000

クラスⅢ免疫検査用シリーズ A型肝炎ウイルス免疫グロブリンMキット


ルミパルス[®] II HAVIgM

■全般的な注意

1. 本試薬は、体外診断用であるため、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 本試薬でIgM型抗HAV抗体陽性と判定されても、ただちにA型肝炎であるとは診断できません。本試薬の判定結果以外に他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。
3. 添付文書以外の使用方法については保証を致しません。
4. HAVIgM用標準陽性溶液に用いられている原料は、HBs抗原、HCV抗体およびHIV抗体陰性のヒト血清を使用しておりますが、感染の危険性があるものとして検体同様十分に注意して取扱ってください。
5. HAVIgM用標準陽性溶液は、非働化したIgM型抗HAV抗体陽性の原料を使用しておりますが、A型肝炎ウイルスは完全には不活化されておりませんので、感染の危険性があるものとして検体同様十分に注意して取扱ってください。
6. HAVIgM用標準陰性溶液に用いられている原料は、HAV抗体、HBs抗原、HCV抗体およびHIV抗体陰性のヒト血清を使用しておりますが、感染の危険性があるものとして検体同様十分に注意して取扱ってください。
7. 本試薬には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。試薬が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。
8. 本試薬の使用に際しては、本書とあわせて使用する測定システムの添付文書および取扱説明書をご参照ください。

■形状・構造等(キットの構成)

1. 抗体結合粒子^{注1)}(使用時液状、250μL / 免疫反応カートリッジ)
抗ヒトIgMモノクローナル抗体(マウス) 結合フェライト粒子を含みます。
2. 酵素標識複合体(液状、350μL / 免疫反応カートリッジ)
アルカリホスファターゼ(ALP) 標識HAVモノクローナル抗体(マウス) および不活化処理HAV抗原^{注2)}を含みます。

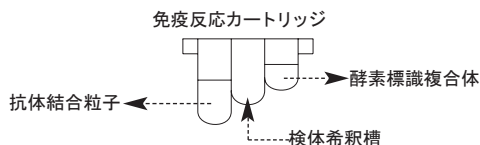

3. HAVIgM用標準溶液
□ HAVIgM用標準陰性溶液(液状、2.0mL×1)
□ HAVIgM用標準陽性溶液(液状、2.0mL×1)
4. 基質液(液状、100mL×6、50mL×6)
基質としてAMPPD^{注3)}を0.2mg/mL含みます。
ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。
5. 洗浄液(濃縮液、1000mL×1)
6. 検体希釈液(液状、300mL×4、80mL×4)
ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

注1) 15℃以下の温度ではゲル化しています。

注2) whole virion

注3) AMPPD: 3-(2'-spiroadamantane)-4-methoxy-4-(3'-phosphoryloxy)phenyl-1,2-dioxetane disodium salt/3-(2'-スピアアダマンタン)-4-メトキシ-4-(3'-ホスホリロキシ)フェニル-1,2-ジオキセタン・2ナトリウム塩

■使用目的

血清又は血漿中のIgM型HAV抗体の検出

■測定原理

本試薬は2ステップサンドイッチ法に基づいた化学発光酵素免疫測定によるIgM型抗HAV抗体検出試薬です。

<反応プロトコール; 検体希釈2ステップモード>

試薬・検体のセット

第一反応

抗体結合粒子に結合した抗ヒトIgM抗体と検体中に含まれるIgM(IgM型抗HAV抗体を含む)による免疫複合体が形成されます。

検体またはHAVIgM用標準溶液20μLは、自動的に検体希釈液180μLと混合されます。抗ヒトIgM抗体が結合した抗体結合粒子250μLに、希釈済みの検体またはHAVIgM用標準溶液20μLが分注されます。反応液は、攪拌後37℃で10分間インキュベートされます。

洗浄

反応液除去の後、抗体結合粒子の洗浄が行われます。粒子は磁石によって集められ、反応液が除去されます。洗浄液注入、洗浄液の除去が繰り返され、粒子が洗浄されます。

第二反応

抗ヒトIgM抗体を介して結合した検体中のIgM型抗HAV抗体と、アルカリホスファターゼ標識抗HAV抗体と不活化処理HAV抗原の複合体(酵素標識複合体)による免疫複合体が形成されます。

酵素標識複合体250μLと抗体結合粒子が混合されます。反応液は37℃で10分間インキュベートされます。

洗浄

再び反応液除去の後、抗体結合粒子の洗浄が行われます。粒子は磁石によって集められ、反応液が除去されます。洗浄液注入、洗浄液の除去が繰り返され、粒子が洗浄されます。

酵素反応

基質液200μLを粒子に加え攪拌後、37℃で5分間反応させます。

測光

波長477nmに発光極大を持つ光の発光量を測定します。

基質液に含まれるAMPPDは、粒子に間接的に結合したアルカリホスファターゼの触媒作用により分解します。分解に伴って放出される光は、粒子に結合したIgM型抗HAV抗体量を反映するため、これを測定することによってIgM型抗HAV抗体の検出を行うことができます。

■操作上の注意

1. 測定検体の性質、採取法

- 1) 可能な限り新鮮な検体を用い、保存する場合は-20℃以下で凍結保存してください。
- 2) 検体を繰り返し凍結融解することは避けてください。
- 3) 赤血球・その他の有形成分、沈殿物、浮遊物が含まれている検体では、測定値に影響を与える場合があります。正しい結果が得られるように遠心または除去した後に使用してください。
- 4) 検体間の汚染が生じないように検体は注意して取扱ってください。
- 5) 血清検体を非働化することによる影響はありません。
- 6) 検体に抗凝固剤(EDTA-二カリウム、ヘパリンナトリウム、クエン酸ナトリウム)を添加して試験した結果、それぞれ10mg/mL、100U/mL、38mg/mLまで測定値に影響は認められませんでした。また、液状の抗凝固剤を用いる場合は、検体の希釈率にご注意ください。

2. 妨害物質・妨害薬剤

陽性検体にビリルビンF、ビリルビンC、ヘモグロビンを添加して試験した結果、それぞれ19.5mg/dL、21.5mg/dL、430mg/dLまで、測定値に影響は認められませんでした。また、乳ビに関しても、2830濁度まで測定値に影響は認められませんでした。

■用法・用量(操作方法)

1. 試薬の調製法

- 1) 抗体結合粒子および酵素標識複合体
免疫反応カートリッジには抗体結合粒子および酵素標識複合体が充填されています。カートリッジカセットの透明フィルムを剥がし、そのまま使用します。
- 2) HAVIgM用標準溶液
常温に戻してから軽く転倒混和して使用します。
デッドボリュームを考慮して、サンプルカップに必要な量を滴下します。溶液1滴あたりのおよその滴下量は45μLです。滴下量は容器を押す強さや気泡の混入によって変動します。
デッドボリュームはご使用の測定システムによって異なりますので各測定システムの取扱説明書をご覧ください。一例としてルミパルス[®] Jでサンプルカップをご使用の場合、デッドボリュームは100μLとなります。
- 3) 基質液
そのまま使用します。
- 4) 洗浄液
濃縮液のため精製水で10倍に希釈し、よく攪拌します。希釈した洗浄液は、常温に戻してから使用します。
- 5) 検体希釈液
常温に戻してからそのまま使用します。

2. 必要な器具・器材

- 1) マイクロピペット、サンプリングチップおよびサンプルカップ
2) 全自動化学発光酵素免疫測定システム

3. 測定法

- 1) 測定システムの取扱説明書を参照し、検体および測定に必要な試薬を所定の位置にセットしてください。（サンプルの最少必要量は、使用する容器や測定システムによって異なりますので、各測定システムの取扱説明書をご覧ください。）
2) HAV IgM用標準溶液および検体の測定依頼内容をそれぞれ入力します。
3) 測定を開始する前に、カートリッジ、基質液、洗浄液、検体希釈液、サンプリングチップの残量を確認します。
4) スタートキーを押し、測定を開始します。装置内で自動的に実行される操作については測定原理の「反応プロトコル」の項を参照ください。

4. IgM型抗HAV抗体の検出

検体中のIgM型抗HAV抗体は、HAV IgM用標準溶液の発光量をもとに算出されたカットオフインデックス（C.O.I.）から自動的に検出されます。

■測定結果の判定法

1. カットオフインデックス（C.O.I.）の計算

下記の式に従って検体のC.O.I.を計算します。
 $C.O.I. = S \text{ (検体の発光量)} / C \text{ (カットオフ値)}$
C: HAV IgM用標準陽性溶液の発光量×1

2. 判定

陰性：C.O.I. が1.0未満を示す検体は陰性と判定します。
陽性：C.O.I. が1.0以上を示す検体は陽性と判定します。

3. 判定上の注意

- 1) HAV感染初期では、抗体が産生されなかったり、産生されていても抗体の量が少ない場合があります。感染が疑われる場合には本試薬の判定結果が陰性であっても、経時的に検査し、また他の検査結果、臨床症状等を考慮して総合的に判断してください。
2) 検体中に存在する未同定の非特異反応性物質の影響により、まれに測定値が正確に得られない場合がありますので、他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。
3) 陽性と判定された検体は、検体中のフィブリンクロットや赤血球等の有形成分の存在、検体間の汚染、非特異反応等の要因により、偽陽性の可能性もあります。
4) 自己免疫疾患患者の血清では非特異的な反応が起こりうるので、本試薬の判定結果に基づく診断は、他の検査結果、臨床症状等を考慮して総合的に判断してください。

■臨床的意義

A型肝炎ウイルスに対する抗体のうち、IgM型抗HAV抗体は初期から数ヵ月間一過性に検出されるため、A型肝炎感染の確定診断、急性肝炎の定型診断に有用とされています。^{1)~2)}
本試薬は、化学発光基質（AMPPD）を用いた化学発光酵素免疫測定法^{3)~5)}（CLEIA; chemiluminescent enzyme immunoassay）に基づく試薬で、全自動化学発光酵素免疫測定システム（代表例:ルミパルス *J*）専用試薬です。

■性能

1. 性能

- 1) 感度
HAV IgM用標準溶液を所定の操作で測定するとき、HAV IgM用標準陽性溶液とHAV IgM用標準陰性溶液の発光量の比は20以上になります。
2) 正確性
自家管理検体3例を所定の操作で測定するとき、測定値は各管理値に対して±20%以内になります。
3) 同時再現性
自家管理検体を所定の操作で6回繰り返し測定するとき、変動係数（CV値）は10%以下になります。

2. 関連性試験成績

- 1) 血清検体に関する関連性
検体267例を使用し、既存RIA法との関連性（一致率）を検討した結果、以下に示す成績が得られました。

表1 関連性（一致率）試験成績

		対 照 品		合 計
		陽 性	陰 性	
本 品	陽 性	106例	2例	108例
	陰 性	1例	158例	159例
合 計		107例	160例	267例

一致率98.9%（264例 / 267例）

不一致となった検体3例に関して他法（EIA法）で確認したところ全例陰性となり、カットオフ近辺での不一致と考えられました。

- 2) 血漿検体に関する関連性
同一人から採取した血清・血漿ペア検体55例を使用し、本試薬にて関連性（一致率）を検討した結果、以下に示す成績が得られました。

表2 血清・血漿関連性（一致率）試験成績

		血 清		合 計
		陽 性	陰 性	
血 漿	陽 性	2例	0例	2例
	陰 性	0例	53例	53例
合 計		2例	53例	55例

一致率100%（55例 / 55例）

■使用上又は取扱い上の注意

1. 取扱い上（危険防止）の注意

- 1) 検体はHIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取扱ってください。
2) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるベッティングを行なわないでください。
3) 基質液はアルカリ性溶液（pH10）です。使用に際しては、液が皮膚についたり、目に入らないように注意してください。
4) 試薬が誤って目や口に入った場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。

2. 使用上の注意

- 1) 使用に際しては本書、装置の添付文書ならびに取扱説明書に記載された使用法に従ってください。
2) 免疫反応カートリッジセット（抗体結合粒子・酵素標識複合体、HAV IgM用標準溶液）、基質液、洗浄液、検体希釈液は個別に包装されていますので、ご使用の測定システムに合わせ、組み合わせで使用してください。
3) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。各構成試薬外箱および容器の表示をご確認のうえ使用してください。
4) サンプリングチップ、サンプルカップは、使用する測定システム指定のものを使用してください。
5) サンプリングチップ、サンプルカップは常に新しいものを使用してください。
6) HAV IgM用標準溶液滴下の際に滴の中に気泡が多量に混入する場合は、残量が僅かですので新しいボトルを使用してください。サンプルカップに泡が残りますとサンプリング不良の原因になる場合があります。
7) HAV IgM用標準溶液は、常温に戻してから使用してください。
8) 試薬は保存条件を守って使用してください。特に凍結しないように注意してください。
9) 検体およびHAV IgM用標準溶液は蒸発による濃縮を考慮し、サンプルの準備後は速やかに測定を開始してください。
10) HAV IgM用標準溶液は、免疫反応カートリッジと同一ロットのものを使用してください。
11) 正確な測定を行うために、精製水は常に新しいものを使用してください。
12) 基質液を装置にセットした後は、基質液交換時まで取外しは避けてください。基質液がアルカリホスファターゼ（ALP）に汚染されますと使用できません。手指が直接基質液に触れた場合は、廃棄してください。
12) ソーダライムは交換せずに長期間使用を続けると、二酸化炭素の吸収力が低下します。また基質キャップパッキンも交換せずに長期間使用を続けると密閉性が失われ基質液を劣化させる原因となります。ソーダライムと基質キャップパッキンの交換時期についてはご使用の測定システムの取扱説明書をご覧ください。一例としてルミパルス *J* の場合は1ヵ月ごとに交換してください。

3. 廃棄上の注意

- 1) 各試薬には保存剤として以下のとおりアジ化ナトリウムが含まれています。廃棄する際は爆発性の金属アジドが生成されないように多量の水とともに流してください。
洗浄液：1.0%（希釈調製前）、基質液：0.05%、
抗体結合粒子、酵素標識複合体、HAV IgM用標準溶液、検体希釈液：0.1%
2) 試薬および容器等を廃棄する場合は、廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。
3) 廃液の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法などの規制に従って処理してください。
4) 使用した器具（ピペット、試験管等）、廃液、サンプリングチップ等は、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1000ppm、1時間以上浸漬）、グルタルアルデヒド（2%、1時間以上浸漬）等による消毒処理あるいは、オートクレーブ（121℃、20分以上）による滅菌処理を行ってください。
5) 検体、廃液等が飛散した場合には次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1000ppm、1時間以上浸漬）、グルタルアルデヒド（2%、1時間以上浸漬）等によるふき取りと消毒を行ってください。



FDX03T

■貯蔵方法・有効期間

- 1.貯蔵方法
- 2.有効期間
- 抗体結合粒子
- 酵素標識複合体
- HAV Ig M用標準溶液
- 基質液
- 洗浄液
- 検体希釈液
- 使用期限については、各構成試薬の外箱および容器の表示をご参照ください。

■包装単位

個別包装
ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

コードNo.	品名	包装
219867	ルミパルスII HAV Ig M 免疫反応カートリッジセット (抗体結合粒子・酵素標識複合体・ HAV Ig M用標準溶液)	42テスト×2
292730	ルミパルスII HAV Ig M 免疫反応カートリッジセット (抗体結合粒子・酵素標識複合体・ HAV Ig M用標準溶液)	14テスト×3
219973	ルミパルス 基質液	100mL×6
292600	ルミパルス 基質液	50mL×6
219942	ルミパルス 洗浄液	1000mL×1
219935	ルミパルス 検体希釈液	300mL×4
292617	ルミパルス 検体希釈液	80mL×4

■主要文献

- 1) 日本消化器病学会 肝機能研究班：肝疾患における肝炎ウイルスマーカーの選択基準（4版）．日本消化器病学会雑誌，103：1403～1412，2006.
- 2) 佐田通夫，他：A型肝炎の最近の動向と合併症．肝臓，42(11):575～580,2001.
- 3) Nishizono I, et al.：Rapid and sensitive chemiluminescent enzyme immunoassay for measuring tumor markers. Clinical Chemistry, 37：1639～1644, 1991.
- 4) 中桐逸博，他：化学発光酵素免疫測定システム「ルミパルス Ⅱ」によるHAVIgMおよびHAVAb測定試薬の評価．医学と薬学，40(2):335～343, 1998.
- 5) 相馬史，他：化学発光酵素免疫測定試薬 CLEIA-HAVAb/HAVIgMを用いた血中HA抗体測定の基礎的検討．臨床検査機器・試薬，21(5):523～528, 1998.

■問い合わせ先

富士レビオ株式会社 お客様コールセンター
TEL：0120-292-832
FAX：03-5695-9234

本製品は、Applied Biosystems.から導入した技術に基づいて製造したものです。

